




**НОВАЯ ТЕХНИЧЕСКИ УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА
БЕСКОНТАКТНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК.**

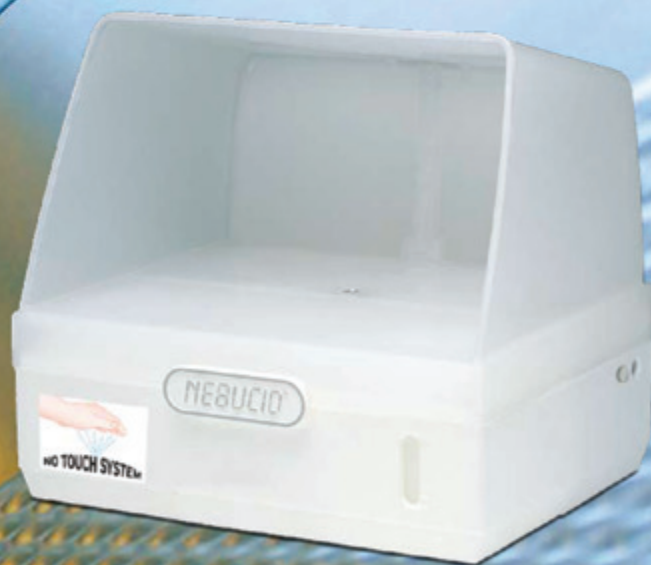

NEBUCID®

NEBUCID® DERMOSOL® NEW NEB



Совершенная дезинфекция рук

В условиях повышающегося значения дезинфекции рук в медицинской среде аппарат Dermocol® NEWNEB просто нельзя игнорировать. Эта система бесконтактной дезинфекции рук при использовании дезинфицирующего препарата DERMOCOL® New Colourless гарантирует совершенную дезинфекцию рук при каждом использовании. Датчик аппарата автоматически распыляет DERMOCOL® New Colourless на ваши руки для идеальной дезинфекции. Аппарат Dermocol® NEWNEB может так же использоваться для надёжной дезинфекции инструментов и может управляться вручную простым нажатием кнопки.

Техническое совершенство

В новый аппарат Dermocol® NEWNEB внесены усовершенствования, что позволяет работать ему лучше, чем когда-либо, и обеспечивает абсолютную надёжность:

- новый носик спрея с удвоенным давлением обеспечивает лучший контакт дезинфицирующего средства DERMOCOL® New Colourless с поверхностью рук
- новое расположение кнопки ON/OFF
- база аппарата изготовлена из нетоксичного, пригодного для переработки пластика VALOX®
- улучшенная прокладка под носиком спрея препятствует возможному соприкосновению дезинфицирующей жидкости и механизма аппарата
- новый аккумулятор с улучшенными контактами
- новая электронная плата без свинца

Dermocol® NEWNEB технические характеристики

Размеры	В250 x Ш260 x Г220 мм
Вес	1,5 кг без батареи, с пустым резервуаром
Вместительность резервуара	1,7 л
Потребление DERMOCOL® New Colourless	5,0 мл средства за одно применение
Источник питания	100 – 240V 50/60 Hz 0.2 A 15VDC=
Мощность	Макс. 6 W
Подключение	Подключение к сети или аккумулятор (опция)
Цвет	Белый

Аксессуары к Dermocol® NEWNEB

Аккумулятор	NWNP01
-------------	--------

Дезинфицирующее средство DERMOCOL® New Colourless

Готовый к использованию антисептик на базе этанола для гигиенической и хирургической дезинфекции рук. Протестирован и рекомендован для применения с препаратом Dermocol® NEWNEB. Идеален для использования в перерыве между приёмами, обладает быстрым и продолжительным действием. Содержит увлажняющие защитные компоненты, поддерживающие pH кожи рук. DERMOCOL® New Colourless обладает широким спектром действия и эффективен против стафилококка, бактерий, туберкулёза, грибковых инфекций, вируса бешенства, вируса BVDV, ВИЧ, атипичной пневмонии, вируса гриппа H5N1, ротавируса.

Состав

В 100 мл DERMOCOL® New Colourless содержится 75,5 мл этилового спирта, а так же увлажняющие и смягчающие компоненты.

Упаковка

DERMOCOL® New Colourless поставляется в экономичных канистрах ёмкостью 5 л.



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ

ЮНИДЕНТ: +7 (495) 434-4601, fax +7 (495) 434-1020
ЮНИДЕНТ-Поволжье: +7 (846) 979-8600, fax +7 (846) 979-8601
www.unident.net e-mail: unident@unident.net



UNIDENT

